

LDR, LDR Spine, LDR Medical, Avenue, BF+, BF+(Ph), Bi-Pack, C-Plate, Easyspine, LaminoTome, L90, MC+, Mobl, Mobl-C, Mobl-L, Mobl-T, Mobl-T, ROI, ROI-A, ROI-C, ROI-MC+, ROI-T, SpineTune e VerteBRIDGE® são marcas comerciais ou marcas registradas, de propriedade da LDR Holding Corporation ou de suas afiliadas na França, nos Estados Unidos e outros países.

www.ldrmedical.com



Estados Unidos
13785 Research Boulevard
Suite 200
Austin, Texas 78750
+1 512.344.3333

França
Hôtel de bureau 1
4, rue Gustave Eiffel
10430 Rosières Près Troyes, França
+33 (0)3 25 82 32 63

China
Unit 06, Level 16, Building A,
Beijing Global Trade Center #36
North Third Ring Road
East, Dongcheng District,
Beijing, China, 100013
+86 10 58256655

Brasil
Av. Pereira Barreto, 1395-19º andar
Salas 192 a 196
Torre Sul-Bairro Paraisópolis
Santo André / São Paulo-Brasil
CEP 09190-610
+55 11 4332 7755

AVE BR 1 US BR A 10.2015

INSTRUMENTAL 80444810016
IMPLANTE 80444810013



Avenue® L

CAGE LATERAL LOMBAR (LLIF) com



Avenue® L

CAGE LATERAL LOMBAR (LLIF)

O Cage Lateral Lombor Avenue® L tem um design que reúne força, versatilidade e estabilidade. Representa o que há de mais avançado em termos de Cage lombar, incorporando uma fixação intervertebral com perfil zero. A moderna, integrada e autoguiada Tecnologia de Âncoras VerteBRIDGE®, simplifica a inserção do Cage através de uma abordagem direta e minimamente invasiva.

Características


- Ampla variedade de tamanhos para melhor adaptação à anatomia de cada paciente e para uma superfície de contato otimizada com os platôs vertebrais.
- Ponta chanfrada para facilitar a inserção
- O Pilar central aumenta a resistência mecânica do Cage auxilia na estabilização do enxerto durante a sua inserção no espaço intervertebral
- O Ajuste de profundidade regulável do Porta Implante assegura um melhor posicionamento do Cage antes da implantação das Âncoras VerteBRIDGE®
- Implantação guiada das Âncoras com impactação no eixo do disco, garantindo praticidade, segurança e menor exposição
- Embalagem estéril garantindo a qualidade do produto e sua total rastreabilidade

Dimensões

Variedade de produtos

Largura (Ântero-posterior)	17mm and 22mm
Ângulo lordótico	0° e 6°
Altura (Infero-superior)	8mm, 10mm, 12mm, 14mm
Comprimento (Látero-lateral)	40mm, 45mm, 50mm, 55mm
Comprimento da Âncora	Curto, Medio e Longo

† A variedade de produtos disponíveis pode variar em função do país e do mercado.

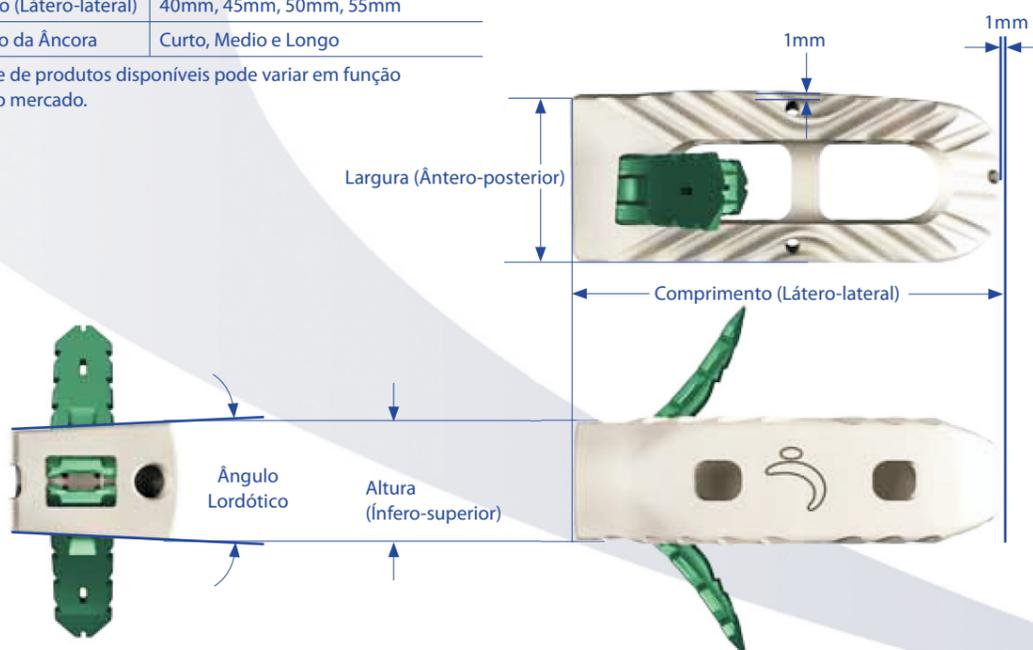

Características da Tecnologia de Âncoras VerteBRIDGE®*

- Com **perfil zero**, não apresenta qualquer saliência na lateral dos corpos vertebrais
- Âncoras com **trava automática** projetadas para oferecer estabilidade a curto e longo prazo
- Âncoras **autoguiadas e curvas** facilitam a implantação
- O Porta Implante proporciona **proteção das estruturas anatômicas** durante a implantação das Âncoras
- **Inovador sistema de posicionamento das Âncoras** otimizado para abordagem lateral

